




## PRODUKTVEJLEDNING

**PRODUKTKATEGORI:** Mikroindkapslet Test af Lugtesans fra Sensonics

**PRODUKTNAVN:** Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®)

### BESKRIVELSE:

Denne 12-styksversion af Smell Identification Test®, også kendt under navnet Cross-Cultural Smell Identification Test, er velegnet til at kvantificere tab af lugtesans, hvis der er mindre end fem minutter til rådighed. Denne test er velegnet til befolkningsundersøgelser og i forbindelse med almindelige arbejdspladsundersøgelser. Duftene er letgenkendelige i de fleste kulturer. Percentilnormer, der er baseret på tusindvis af testpersoner, findes i administrationsvejledningen til Brief Smell Identification Test™. Hvis det er første gang, du bestiller, anbefaler vi at købe denne vejledning.

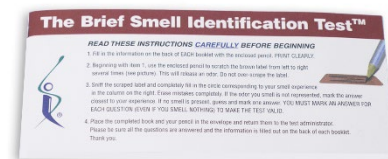

### ANVISNINGER:


- Udfyld informationen på bagsiden af HVERT hæfte ved hjælp af den medfølgende blyant. SKRIV TYDELIGT.
- Med den medfølgende blyant starter du med den 1. prøve i hæftet og kradser på den brune etiket fra venstre mod højre (se billede). Dette frigør en duft. Undlad at skrabe for meget på etiketten.
- Snus til den label, du har skrabet på, og udfyld den cirkel, der svarer til din duftoplevelse, helt i kolonnen til højre. Fejl skal slettes fuldstændigt. Hvis den duft, du oplever, ikke er repræsenteret, markeres det svar, der kommer tættest på din oplevelse. Hvis du ikke fornemmer en duft, skal du gætte og markere et svar. DU SKAL MARKERE ET SVAR FOR HVERT SPØRGSMÅL (OGSÅ SELV OM DU INTET KAN LUGTE), FØR TESTEN ER GYLDIG.
- Placer det udfyldte hæfte og din blyant i kuerten, og aflever den til testadministratoren. Kontroller, at alle spørgsmål er besvaret, og at informationerne på bagsiden af hæftet er blevet udfyldt. Mange tak.



Each test is single use only



Keep Dry

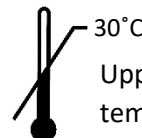

Upper limit storage temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, bør være indberettes til fabrikanten og medlemsstatens kompetente myndighed.