




## ANLEITUNG FÜR DAS PRODUKT

**PRODUKTKATEGORIE:** Sensonics mikroverkapselte Geruchstests

**PRODUKTNAME:** Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®)

**BESCHREIBUNG:**

Diese 12-Punkte-Version des Smell Identification Test® (Test zur Erkennung von Gerüchen) ist auch bekannt als Cross-Cultural Smell Identification Test (kulturübergreifender Test zur Erkennung von Gerüchen) und eignet sich zur Quantifizierung von Geruchsverlust in Situationen, in denen weniger als fünf Minuten Zeit zur Verfügung stehen. Dieser Test ist hilfreich für Umfragen in der Bevölkerung und allgemeine Arbeitsplatzstudien. Die Gerüche sind den meisten Kulturen geläufig. Im Brief Smell Identification Test™ Administration Manual (Handbuch zur Durchführung des Kurztests zur Erkennung von Gerüchen) finden Sie die Perzentilnormen, die auf Tausenden von Probanden basieren. Wenn dies Ihre erste Bestellung ist, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch zu kaufen.

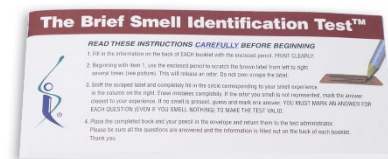

**ANLEITUNG:**


- Tragen Sie die Informationen auf der Rückseite JEDER Broschüre mit dem beiliegenden Stift ein. **SCHREIBEN SIE DEUTLICH.**
- Beginnen Sie mit Punkt 1 dieser Broschüre. Rubbeln Sie das braune Etikett mehrmals von links nach rechts mit dem beiliegenden Stift (siehe Abbildung). Dadurch wird ein Geruch freigesetzt. Kratzen Sie das Etikett nicht übermäßig ab.
- Riechen Sie am abgerubbelten Etikett und füllen Sie den Kreis, der zu Ihrem Geruchsempfinden passt, in der Spalte rechts vollständig aus. Löschen Sie Fehler vollständig. Wenn der Geruch, den Sie riechen, nicht angegeben ist, markieren Sie die Antwort, die Ihrem Empfinden am nächsten kommt. Wenn Sie nichts riechen ist, raten Sie und markieren Sie eine Antwort. **SIE MÜSSEN BEI JEDER FRAGE EINE ANTWORT MARKIEREN (AUCH WENN SIE NICHTS RIECHEN), DAMIT DER TEST GÜLTIG IST.**
- Legen Sie die ausgefüllte Broschüre zusammen mit dem Stift in den Umschlag und geben Sie ihn dem Testadministrator zurück. Beantworten Sie alle Fragen und tragen Sie die Informationen auf der Rückseite der Broschüre ein. Vielen Dank.



Each test is single use only



Keep Dry

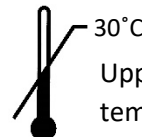

30°C

Upper limit storage temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich in Bezug auf das Produkt ereignet hat, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet.