




## HOJA DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

**CATEGORÍA DEL PRODUCTO:** Pruebas olfativas microencapsuladas de Sensonics

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®)

### DESCRIPCIÓN:

Esta versión de 12 ítems del Smell Identification Test®, también conocido como prueba de identificación olfativa intercultural, es útil para cuantificar la pérdida de olfato en situaciones en las que se dispone de menos de cinco minutos de tiempo. Esta prueba es útil en encuestas de población y estudios en lugares de trabajo generales. Los olores son bien conocidos en la mayoría de las culturas. Están disponibles las normas de percentiles basadas en miles de sujetos en el Manual de administración del Brief Smell Identification Test™. Si es la primera vez que realiza un pedido, le recomendamos que compre este manual.

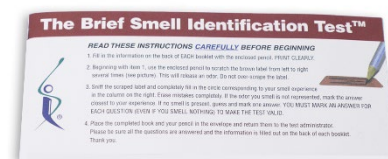

### INSTRUCCIONES:


- Complimente la información del reverso de CADA folleto usando el lápiz incorporado. **ESCRIBA CON CLARIDAD.**
- Empezando por el ítem 1 del folleto, utilice el lápiz incorporado para rasgar la etiqueta marrón de izquierda a derecha varias veces (ver imagen). Esta acción liberará un olor. No rasque la etiqueta en exceso.
- Olfatee la etiqueta rascada y rellene por completo el círculo correspondiente a la experiencia olfativa que haya tenido en la columna de la derecha. Borre los errores completamente. Si el olor que percibe no está representado, marque la respuesta que más se aproxime según su experiencia. Si no percibe ningún olor, haga una suposición y marque una respuesta. **DEBE SEÑALAR UNA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA (INCLUSO SI NO HUELE NADA) PARA QUE LA PRUEBA SEA VÁLIDA.**
- Ponga el folleto cumplimentado y el lápiz en el sobre y devuélvalos al administrador de la prueba. Verifique que haya respondido a todas las preguntas y que haya cumplimentado también la información requerida en el reverso del folleto. Gracias.



Each test is single use only



Keep Dry

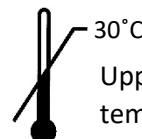

Upper limit storage temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

**MANUFACTURER** [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands