




ISTRUZIONI SUL PRODOTTO

CATEGORIA PRODOTTO: Test di identificazione degli odori microincapsulato Sensonics

NOME DEL PRODOTTO: Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®)

DESCRIZIONE:

Questa versione a 12 voci dello Smell Identification Test®, noto anche come Cross-Cultural Smell Identification Test, è utile per quantificare la perdita di odore in situazioni in cui sono disponibili meno di cinque minuti di tempo. È utile nelle indagini sulla popolazione e negli studi generali sul posto di lavoro. Gli odori sono ben noti nella maggior parte delle culture. Le norme percentili, basate su migliaia di soggetti, sono disponibili all'interno del Manuale di somministrazione del Brief Smell Identification Test™. Se fosse la prima volta che si ordina il test, si consiglia di acquistare anche il manuale.

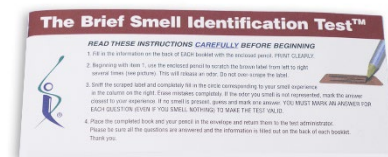

ISTRUZIONI:

- Compilare le informazioni sul retro di OGNI opuscolo con la matita allegata. **COMPILARE IN MODO CHIARO.**
- A partire dalla voce 1 dell'opuscolo, utilizzare la matita allegata per raschiare l'etichetta marrone da sinistra a destra più volte (vedere l'immagine). Si sprigionerà un odore. Non raschiare eccessivamente.
- Annusare l'etichetta raschiata e riempire completamente il cerchio corrispondente alla propria esperienza olfattiva nella colonna a destra. Cancellare completamente gli errori. Se l'odore che si sente non fosse rappresentativo, contrassegnare la risposta più vicina alla propria esperienza. Se non fosse presente alcun odore, tirare ad indovinare e segnare una risposta. È **NECESSARIO INDICARE UNA RISPOSTA PER OGNI DOMANDA (ANCHE SE NON SI SENTE ALCUN ODORE) PER RENDERE VALIDO IL TEST.**
- Riporre l'opuscolo compilato e la matita nella busta e restituirli alla persona che somministra il test. Assicurarsi di aver risposto a tutte le domande e che siano state precisate tutte le informazioni sul retro dell'opuscolo. Grazie.



Each test is single use only




Keep Dry



30°C

Upper limit storage temperature

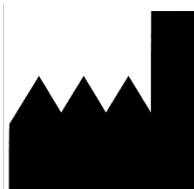

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands