




## BLAD MET PRODUCTINSTRUCTIES

**PRODUCTCATEGORIE:** Geurtesten met micro-capsules van Sensonics

**PRODUCTNAAM:** Korte geuridentificatietest™ (B-SIT®)

### BESCHRIJVING:

Deze versie van de geuridentificatietest met 12 items®, ook wel multiculturele geuridentificatietest genoemd, is nuttig voor het kwantificeren van geurverlies in situaties waar een tijd van minder dan vijf minuten beschikbaar is. Deze test is nuttig bij bevolkingsonderzoeken en bij algemene onderzoeken naar de werkplek. De geuren zijn in de meeste culturen welbekend. Percentienormen, gebaseerd op duizenden onderwerpen, zijn beschikbaar in de toedieningshandleiding van de korte geuridentificatietest™. Als dit uw eerste bestelling is, raden wij u aan om deze handleiding aan te schaffen.

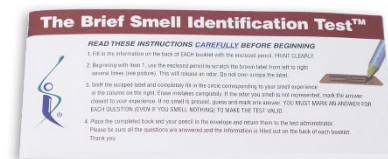

### INSTRUCTIES:


- Vul de informatie achter op ELK boekje in met het bijgevoegde potlood. **SCHRIJF DUIDELIJK EN IN HOOFDLETTERS.**
- Begin met item 1 van het boekje en gebruik het bijgevoegde potlood om het bruine etiket meerdere keren van links naar rechts te bekrassen (zie afbeelding). Hierbij komt een geur vrij. Schraap niet te veel over het etiket.
- Snuif aan het afgeschaapte etiket en vul in de rechterkolom de cirkel die met uw geurbeleving overeenkomt volledig op. Gum fouten volledig uit. Als de geur die u ruikt er niet bij staat, markeer dan het antwoord dat het dichtst bij uw ervaring ligt. Als er geen geur aanwezig is, raad er dan een en markeer één antwoord. **OM DE TEST GELDIG TE LATEN ZIJN, MOET U EEN ANTWOORD AANKRUISEN BIJ ELKE VRAAG (ZELFS ALS U NIETS RUIKT).**
- Doe het ingevulde boek en uw potlood in de envelop en geef ze terug aan de testbeheerder. Zorg ervoor dat alle vragen zijn beantwoord en dat de informatie op de achterkant van het boekje is ingevuld. Dank u.



Each test is single use only



Keep Dry

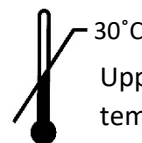

30°C  
Upper limit storage  
temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel moet aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat zijn gemeld.