




## LÄKEMEDEL INSTRUKTIONSBLAD

**LÄKEMEDEL KATEGORI:** Sensonics mikroinkapslade lukttester

**PRODUKT NAMN:** Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®)

**BESKRIVNING:** Denna version med 12 artiklar av Smell Identification Test®, även känd som Cross-Cultural Smell Identification Test, är användbar för att kvantifiera lukt förlust i situationer där mindre än fem minuters tid är tillgänglig. Detta test är användbart i befolkningsundersökningar och allmänna arbetsplatsstudier. Lukterna är välkända i de flesta kulturer. Percentilnormer, baserade på tusentals försökspersoner, finns tillgängliga i Brief Smell Identification Test™ Administrationshandbok. Om det är första gången du beställer rekommenderar vi att du köper den här manualen.

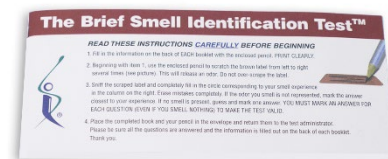

### INSTRUKTIONER:


- Fyll i informationen på baksidan av VARJE broschyr med den bifogade blyertspennan. SKRIV TYDLIGT.
- Börja med punkt 1 i häftet, använd den medföljande penna för att repa den bruna etiketten från vänster till höger flera gånger (se bild). Detta frigör en doft. Skrapa inte etiketten för mycket.
- Lukta på den skrapade etiketten och fyll i hela cirkeln som motsvarar din luktupplevelse i kolumnen till höger. Radera misstag helt och hållet. Om den doft du känner inte finns angiven, markera det svar som ligger närmast din upplevelse. Om du inte känner någon lukt, gissa och markera ett svar. DU MÅSTE MARKERA ETT SVAR FÖR VARJE FRÅGA (ÄVEN OM DU INTE KÄNNER NÅGON LUKT) FÖR ATT TESTET SKA VARA GILTIGT.
- Lägg den färdiga boken och din penna i kuvertet och lämna tillbaka dem till testadministratören. Se till att alla frågor är besvarade och att informationen är ifylld på baksidan av häftet. Tack.




Each test is single use only



Keep Dry

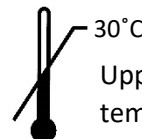

Upper limit storage temperature

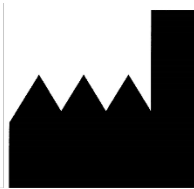

**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands