




ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Οσφρητικά τεστ σε μορφή μικροκαψουλών της Sensonics

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αυτή η έκδοση του τεστ αναγνώρισης οσμών Smell Identification Test® 12 στοιχείων, γνωστή επίσης και ως διαπολιτισμικό τεστ αναγνώρισης οσμών, είναι χρήσιμη για την ποσοτικοποίηση του βαθμού απώλειας της οσμής σε καταστάσεις όπου ο διαθέσιμος χρόνος είναι μικρότερος από πέντε λεπτά. Αυτό το τεστ είναι χρήσιμο σε πληθυσμιακές έρευνες και γενικές μελέτες σε εργασιακούς χώρους. Οι περισσότεροι πολιτισμοί αναγνωρίζουν τις διαφορετικές οσμές. Ποσοστιαία πρότυπα, που βασίζονται σε χιλιάδες άτομα, είναι διαθέσιμα στο εγχειρίδιο χορήγησης του σύντομου τεστ Smell Identification Test™. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που παραγγέλλετε, συνιστούμε την αγορά αυτού του εγχειριδίου.

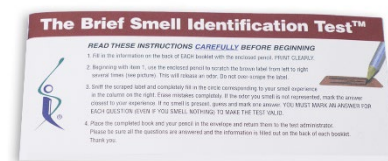

ΟΔΗΓΙΕΣ:


- Συμπληρώστε τις πληροφορίες στο πίσω μέρος ΚΑΘΕ φυλλαδίου με το εσωκλειόμενο μολύβι. ΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
- Ξεκινώντας με το στοιχείο 1 του φυλλαδίου, χρησιμοποιήστε το εσωκλειόμενο μολύβι για να ξύσετε την καφέ ετικέτα από αριστερά προς τα δεξιά αρκετές φορές (βλέπε εικόνα). Αυτό θα απελευθερώσει μια οσμή. Μην ξύσετε υπερβολικά την ετικέτα.
- Μυρίστε την ξυσμένη ετικέτα και μαυρίστε τον κύκλο που αντιστοιχεί στην οσμή που αναγνωρίσατε στη στήλη δεξιά. Σβήστε τελείως τυχόν λάθη. Αν η οσμή που μυρίζετε δεν αντιπροσωπεύεται, σημειώστε την απάντηση που είναι πιο κοντά στην οσμή που αναγνωρίσατε. Αν δεν υπάρχει οσμή, μαντέψτε και σημειώστε μία απάντηση. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΥΡΙΖΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ ΤΟ ΤΕΣΤ.
- Τοποθετήστε το συμπληρωμένο φυλλάδιο και το μολύβι σας στον φάκελο και επιστρέψτε τα στον διαχειριστή του τεστ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχετε συμπληρώσει όλες τις πληροφορίες στο πίσω μέρος του φυλλαδίου. Σας ευχαριστούμε.



Each test is single use only




Keep Dry

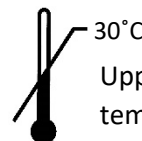

30°C

Upper limit storage temperature

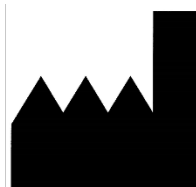

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θ πρέπει να είναι αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.