




## ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОДУКТА

**КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА:** Микрокапсулирани тестове за миризми на Sensonics

**ИМЕ НА ПРОДУКТА:** The Smell Identification Test™ (UPSIT®)

### ОПИСАНИЕ:

The Smell Identification Test™ [UPSIT] е нашият комплексен тест от 40 елемента. Той е най-надеждният (тест- повторен тест  $r = 0,94$ ) и точен обонятелен тест, който се предлага. Той е световният стандарт за изследване на обонянието. Предоставя абсолютна индикация за загуба на мирис (аносмия; лека, умерена или тежка микросомия), както и относителна индикация на база на проценти, свързани с възраст и пол. Също предоставя индекс за откриване на симулиране на заболяване. Включени са норми от почти 4000 мъже и жени по целия възрастов диапазон. За клиентите, които купуват за първи път, предлагаме Ръководство за прилагане на SITTM, което включва легенда за оценяване във вътрешната предна корица.

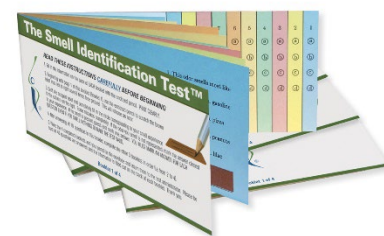

### ИНСТРУКЦИИ:

- Попълнете информацията на гърба на ВСЯКА брошура с приложения молив. ПИШЕТЕ ЯСНО С ПЕЧАТНИ БУКВИ.
- Започвайки със страница 1 на Брошура 1, използвайте приложения молив, за да надраскате кафявия етикет от ляво на дясно няколко пъти (вижте снимката). Това ще доведе до отделяне на миризма. Не прекалявайте с драскането на етикета.
- Помиришете надраскания етикет и запълнете кръгчето, съответстващо на Вашето обоняние, в колоната в дясно. Изтривайте грешките напълно. Ако миризмата, която сте усетил/а, не е налична, отбележете отговора, който се доближава най-много до Вашето усещане. Ако не усещате миризма, предположете и отбележете един отговор. **ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИТЕ ОТГОВОР ЗА ВСЕКИ ВЪПРОС (ДОРИ И ДА НЕ УСЕЩАТЕ НИКАКВА МИРИЗМА), ЗА ДА БЪДЕ ВАЛИДЕН ТЕСТЪТ.**
- След като отговорите на всичките 10 въпроса в брошурата, попълнете другите три брошури последователно (т.е. от 2 до 4).
- Поставете четирите попълнени брошури и Вашия молив в плика и ги върнете на лицето, което провежда теста. Моля, уверете се, че на всичките 40 въпроса е отговорено и информацията на гърба на всяка брошура е попълнена. Благодарим Ви.



Each test is single use only



Keep Dry



30°C

Upper limit storage temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)

EC

REP

**MedEnvoy Global B.V.**  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands