




## NÁVOD K VÝROBKU

**KATEGORIE PŘÍPRAVKU:** Mikrokapsulované čichové testy společnosti Sensonics

**NÁZEV PŘÍPRAVKU:** Smell Identification Test™ (UPSIT®)

### POPIS:

Smell Identification Test™ [UPSIT] (Čichový identifikační test) je náš komplexní test sestávající ze 40 položek. Je to nejspolehlivější ( $r = 0,94$ ) a nejpřesnější dostupný čichový test. Jde o celosvětový standard pro vyšetření čichu. Poskytuje absolutní údaj o ztrátě čichu (anosmie; mírná, středně těžká nebo těžká mikrosomie) a relativní údaj založený na percentilech podle věku a pohlaví. Poskytuje také index pro detekci simulace. Zahrnuti jsou normy od téměř 4 000 mužů a žen v celém věkovém rozmezí. Těm, kdo SITT kupují poprvé, doporučujeme příručku pro správu SITT, která obsahuje bodovací klíč na vnitřní straně přední obálky.

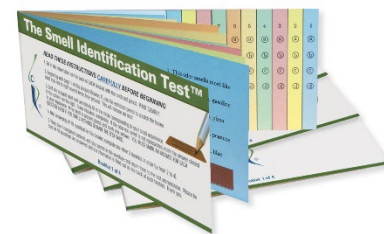

### POKYNY:


- Vyplňte informace na zadní straně KAŽDÉ brožury poskytnutou tužkou. PÍŠTE ČITELNĚ.
- Začněte na straně 1 této brožury 1, použijte přiloženou tužku a několikrát s ní škrábněte na hnědou nálepku zleva doprava (viz obrázek). Tím se uvolní zápach. Neškrábejte nálepku přílišně.
- Čichněte si k oškrábané nálepce a ve sloupečku vpravo vyplňte kroužek, který odpovídá vašemu čichovému vjemu. Chyby dokonale vygumujte. Pokud tam zápach, který cítíte, není, označte odpověď, která je nejbližší vašemu vjemu. Pokud nic necítíte, odhadněte to a označte jednu odpověď. ABY BYL TEST PLATNÝ, MUSÍTE ODPOVĚDĚT NA KAŽDOU OTÁZKU (I POKUD NIC NECÍTÍTE).
- Po zodpovězení všech 10 otázek v brožurě vyplňte postupně další tři brožury (tj. 2 až 4).
- Vložte čtyři vyplněné knížky a tužku do obálky a vraťte je správci testu. Zkontrolujte, že jste odpověděli na všech 40 otázkách a že jste vyplnili informace na zadní straně každé brožury. Děkujeme.



Each test is single use only



Keep Dry

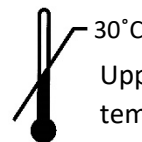

Upper limit storage temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)

EC

REP

**MedEnvoy Global B.V.**  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands