




PRODUKTVEJLEDNING

PRODUKTKATEGORI: Sensonics' mikroindkapslede lugttest

PRODUKTNAVN: Smell Identification Test™ (UPSIT®)

BESKRIVELSE:

Smell Identification Test™ [UPSIT] er vores omfattende test med 40 punkter. Det er den mest pålidelige (test-gentest $r=0,94$) og nøjagtige lugttest på markedet. Det er den verdensomspændende standard for lugttest. Giver en absolut indikation af lugttab (anosmi; mild, moderat eller svær mikrosomi) samt en relativ indikation baseret på alders- og kønsrelaterede percentiler. Giver også et indeks til at detektere simulering. Normer fra næsten 4.000 mænd og kvinder, der spænder over hele aldersgruppen, er inkluderet. For førstegangskøbere anbefaler vi SITTM-administrationsvejledningen, som indeholder pointnøgle på indersiden af forsiden.

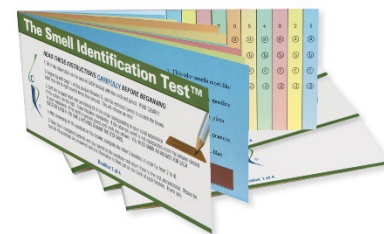

ANVISNINGER:


- Udfyld informationen på bagsiden af HVERT hæfte ved hjælp af den medfølgende blyant. SKRIV TYDELIGT.
- Med den medfølgende blyant starter du med side 1 i hæfte 1 og kradser på den brune etiket fra venstre mod højre (se billede). Dette frigør en duft. Undlad at skrabe for meget på etiketten.
- Snus til den label, du har skrabet på, og udfyld den cirkel, der svarer til din lugtoplevelse, i kolonnen helt til højre. Fejl skal slettes fuldstændigt. Hvis den lugt, du oplever, ikke er repræsenteret, markeres det svar, der kommer tættest på din oplevelse. Hvis du ikke fornemmer en lugt, skal du gætte og markere et svar. DU SKAL MARKERE ET SVAR FOR HVERT SPØRGSMÅL (OGSÅ SELV OM DU INTET KAN LUGTE), FØR TESTEN ER GYLDIG.
- Efter at have besvaret alle 10 spørgsmål i hæftet skal du udfylde de tre andre hæfter i rækkefølge (dvs. fra 2 til 4).
- Placer det udfyldte hæfte og din blyant i kuerten, og aflever den til testadministratoren. Sørg for, at alle 40 spørgsmål er besvaret, og at informationerne på bagsiden af hvert hæfte er udfyldt. Tak.



Each test is single use only



Keep Dry

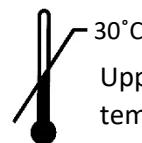

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com

EC

REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands