




ANLEITUNG FÜR DAS PRODUKT

PRODUKTKATEGORIE: Sensonics mikroverkapselte Geruchstests

PRODUKTNAME: Smell Identification Test™ (UPSIT®)

BESCHREIBUNG:

Der Smell Identification Test™ [UPSIT] ist unser umfassender 40-Punkte-Test. Es ist der zuverlässigste (Test-Wiederholungstest $r = 0,94$) und genaueste verfügbare Geruchstest. Der Test gilt als der weltweite Standard für Geruchstests. Er liefert einen absoluten Hinweis auf Geruchsverlust (Anosmie; leichte, mittelschwere oder schwere Mikrosomie) sowie einen relativen Hinweis anhand alters- und geschlechtsbezogener Perzentilen. Der Test bietet auch einen Index zur Erkennung von Simulationen. Zudem sind die Maßstab von fast 4.000 Männern und Frauen aus der gesamten Altersspanne enthalten. Wenn dies Ihre erste Bestellung ist, empfehlen wir Ihnen, das SIT™ Handbuch zu kaufen. Es enthält einen Bewertungsschlüssel auf der Innenseite der vorderen Umschlagseite.

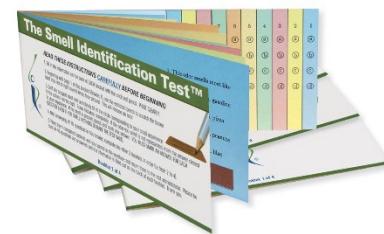

ANLEITUNG:


- Füllen Sie die Informationen auf der Rückseite JEDER Broschüre mit dem beiliegenden Stift aus. SCHREIBEN SIE DEUTLICH.
- Beginnen Sie mit Seite 1 von Broschüre 1. Rubbeln Sie das braune Etikett mehrmals von links nach rechts mit dem beiliegenden Stift (siehe Abbildung). Dadurch wird ein Geruch abgegeben. Kratzen Sie das Etikett nicht übermäßig ab.
- Schnupfen Sie das abgerubbelte Etikett und füllen Sie den Kreis, der zu Ihrem Geruchsempfinden passt, in der Spalte rechts aus. Löschen Sie Fehler vollständig. Wenn der Geruch, den Sie schnupfen, nicht angegeben ist, markieren Sie die Antwort, die Ihrem Empfinden am nächsten kommt. Wenn Sie nichts riechen, schätzen Sie und kreuzen Sie eine Antwort. SIE MÜSSEN BEI JEDER FRAGE EINE ANTWORT MARKIEREN (AUCH WENN SIE NICHTS RIECHEN), DAMIT DER TEST GÜLTIG IST.
- Wenn Sie alle 10 Fragen in dieser Broschüre beantwortet haben, füllen Sie die anderen drei Broschüren der Reihe nach aus (also von 2 bis 4).
- Legen Sie die 4 ausgefüllten Broschüren und den Stift in den Umschlag und geben Sie sie an den Testadministrator zurück. Beantworten Sie alle 40 Fragen und füllen Sie die Informationen auf der Rückseite von jeder Broschüre aus. Vielen Dank.



Each test is single use only



Keep Dry

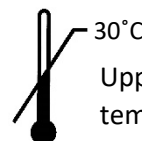

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich in Bezug auf das Produkt ereignet hat, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet.