




TOOTE KASUTUSJUHE

TOOTE KATEGORIA: Sensonics Mikrokapslites lõhnatestid

TOOTE NIMI: The Smell Identification Test™ (UPSIT®)

KIRJELDUS:

The Smell Identification Test [UPSIT] on meie põhjalik 40-punktiline test. See on olemasolevatest lõhnatestidest usaldusväärsem (testi-kordustesti $r=0,94$) ja täpsem. Tegemist on lõhnatesti standardiga kogu maailmas. Test tulemusena saate vanuse- ja sooliste protsentiilide põhjal absoluutse (anosmia, kerge, mõõdukas või raske mikrosmia) ja suhtelise lõhnataju kadumise hinnangu. Samuti esitatakse simulatsiooni tuvastamist võimaldav indeks. Test sisaldab peaaegu 4000 igas vanusevahemikus meeste ja naiste normiväärtusi. Esmakordsetele ostjatele soovitameme kasutusjuhendit SITTM Administratsioon Manual, mille esikaane siseküljelt leiata skoori arvutamise võtme.

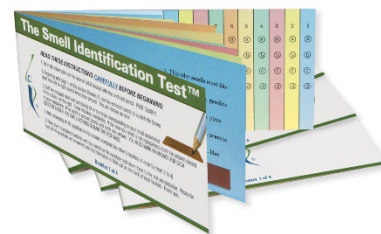

JUHISED:


- Sisestage kaasasoleva pliatsiga andmed IGA voldiku tagaküljele. KIRJUTAGE SELGELT TRÜKITÄHTEDEGA.
- Alustades 1. voldiku esimesest leheküljest kraapige kaasasoleva pliatsiga pruuni silti mitu korda vasakult paremale (vt pilti). See vabastab lõhna. Ärge kraapige väljastpoolt silti.
- Nuusutage kraabitud silti ja täitke parempoolses veerus ring, mis vastab teie lõhnakogemusele. Vead kustutage täielikult. Kui lõhna, mida tunnete, ei ole esitatud, märkige oma kogemusele lähim vastus. Kui lõhn puudub, arvake ja märkige üks vastus. KEHTIVA TESTI SAAMISEKS PEATE MÄRKIMA VASTUSED KÕIKIDELE KÜSIMUSTELE (ISEGI JUHUL, KUI TE LÕHNA EI TUNNE).
- Pärast selle voldiku kõigile 10 küsimusele vastamist täitke järjekorras ülejäänud kolm voldikut (s.t voldikud 2 kuni 4).
- Pange neli täidetud voldikut ja pliats ümbrikku ja tagastage need testi korraldajale. Vastake kindlasti kõigile 40 küsimusele ja lisage iga voldiku tagaküljele nõutud andmed. Täname!



Each test is single use only



Keep Dry

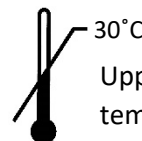

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands