




HOJA DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

CATEGORÍA DEL PRODUCTO: Pruebas olfativas microencapsuladas de Sensonics

NOMBRE DEL PRODUCTO: The Smell Identification Test™ (UPSIT®)

DESCRIPCIÓN:

The Smell Identification Test™ [UPSIT] es nuestra prueba exhaustiva de 40 elementos. Se trata de la prueba olfativa disponible más precisa y fiable (test-retest $r=0,94$). Es el estándar mundial para pruebas olfativas. Proporciona una indicación absoluta de la pérdida olfativa (anosmia y microsomía leve, moderada y grave) además de una indicación relativa basada en percentiles relacionados con la edad y el sexo. También proporciona un índice para detectar la simulación. Se incluyen pautas de cerca de 4000 hombres y mujeres en todos los intervalos de edad. Para quienes compran el producto por primera vez, recomendamos consultar el Manual de administración de SITT™, que incluye una clave de puntuación en el interior de la portada.

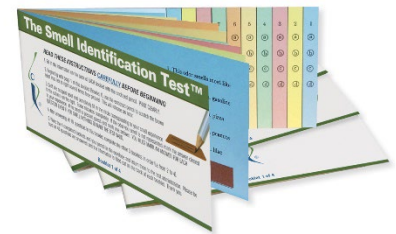

INSTRUCCIONES:

- Rellene la información en la parte posterior de CADA folleto con el lápiz que se incluye. **ESCRIBA EN MAYÚSCULAS DE FORMA CLARA.**
- Empezando por la página 1 del folleto 1, utilice el lápiz que se incluye para rasgar la etiqueta marrón de izquierda a derecha varias veces (ver la imagen). Esto liberará un olor. No rasque la etiqueta en exceso.
- Olfatee la etiqueta rasgada y rellene el círculo correspondiente a su experiencia olfativa en la columna de la derecha. Borre cualquier error completamente. Si el olor que percibe no está representado, marque la respuesta que más se aproxime a su experiencia. Si no percibe ningún olor, haga una suposición y marque una respuesta. **DEBE MARCAR UNA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA (AUNQUE NO HUELA NADA) PARA QUE LA PRUEBA SEA VÁLIDA.**
- Tras responder a las 10 preguntas del folleto, rellene los otros tres folletos en orden (es decir, del 2 al 4).
- Ponga los cuatro folletos debidamente cumplimentados y el lápiz en el sobre y devuélvalos al administrador de la prueba. Asegúrese de responder a las 40 preguntas y de rellenar la información en la parte posterior de cada folleto. Muchas gracias.



Each test is single use only



Keep Dry



30°C

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe ser notificado al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro.