




ISTRUZIONI SUL PRODOTTO

CATEGORIA PRODOTTO: Test di identificazione degli odori microincapsulati Sensonics

NOME DEL PRODOTTO: The Smell Identification Test™ (UPSIT®)

DESCRIZIONE:

The Smell Identification Test™ [UPSIT] è un test di identificazione degli odori con 40 quesiti a risposta multipla. Si tratta del test di identificazione degli odori più affidabile (test- retest $r=0.94$) e accurato disponibile. Rappresenta lo standard mondiale per i test di identificazione degli odori. Offre un'indicazione assoluta della perdita dell'olfatto (anosmia; microsomia lieve, moderata o grave) nonché un'indicazione relativa basata sui percentili correlati all'età e al sesso. Offre anche un indice per identificare il malingering. Sono incluse le norme di quasi 4.000 uomini e donne, in tutte le fasce d'età. Per coloro che acquistano il test per la prima volta, si consiglia la consultazione del Manuale di somministrazione SITT™, che include le chiavi con il punteggio sulla copertina anteriore interna.

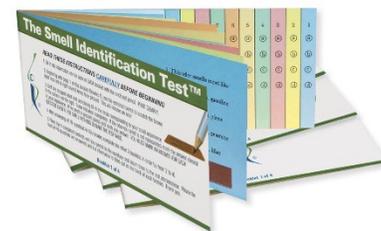

ISTRUZIONI:

- Compilare le informazioni sul retro di OGNI opuscolo con la matita allegata. **COMPILARE IN MODO CHIARO.**
- A partire dalla pagina 1 dell'opuscolo 1, utilizzare la matita allegata per graffiare l'etichetta marrone da sinistra a destra più volte (vedere l'immagine). Si sprigionerà così un odore. Non raschiare eccessivamente.
- Annusare l'etichetta raschiata e compilare il cerchio corrispondente alla propria esperienza olfattiva nella colonna a destra. Cancellare completamente gli errori. Se l'odore che si sente non fosse abbastanza rappresentativo, contrassegnare la risposta più vicina alla propria esperienza. Se non fosse presente alcun odore, fare una supposizione e segnare una risposta. È **NECESSARIO CONTRASSEGNARE UNA RISPOSTA PER OGNI DOMANDA (ANCHE SE NON SI SENTE ALCUN ODORE) PER RENDERE VALIDO IL TEST.**
- Dopo aver risposto a tutte le 10 domande dell'opuscolo, completare gli altri tre opuscoli in ordine (cioè, da 2 a 4).
- Posizionare i quattro opuscoli completati e la matita nella busta e restituirli al somministratore del test. Assicurarsi di aver risposto a tutte e 40 le domande e di aver completato tutte le informazioni sul retro di ogni opuscolo. Grazie.



Each test is single use only




Keep Dry



30°C

Upper limit storage temperature

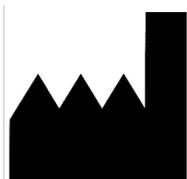

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Qualsiasi incidente grave che si è verificato in relazione al dispositivo dovrebbe essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro.