




TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

TERMÉKKATEGÓRIA: Sensonics mikrokapszulázott szaglástesztek

TERMÉK NEVE: The Smell Identification Test™ (UPSIT®)

LEÍRÁS:

A The Smell Identification Test™ [UPSIT] átfogó, 40 tételből álló teszünk. Ez a rendelkezésre álló legmegbízhatóbb (tesztelés-újratesztelés $r=0,94$) és legpontosabb szaglásteszt. Ez a szaglástesztelés világszintű szabványa. Abszolút mértékben jelzi a szaglás elvesztését (anoszmia; enyhe, mérsékelt vagy súlyos mikroszómia), valamint relatív jelzést ad az életkorra és nemre vonatkozó percentilisek alapján. Mutatót biztosít a szimulálás észleléséhez is. A teljes korosztályt lefedő, közel 4000 férfi és nő alapján létrehozott normák. Az első alkalommal vásárlók számára a SITTM alkalmazási kézikönyvet ajánljuk, amely pontozási kulcsot is tartalmaz a borító belsejében.

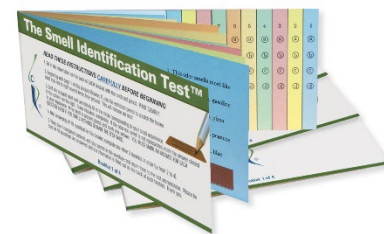

UTASÍTÁSOK:


- A mellékelt ceruzával töltsé ki az adatmezőket MINDEN EGYES füzet hátoldalán. ÍRJON OLVASHATÓAN!
- Az 1. számú füzet 1. oldalával kezdve, a mellékelt ceruzával dörzsölje meg a barna címkét (a mellékelt kép szerint) balról jobbra többször. Ezáltal felszabadul egy illat. Ne dörzsölje túlságosan erősen a címkét!
- Szagolja meg a ledörzsölt címkét, és satírozza be a szaglási élményének megfelelő kört a jobb oldali oszlopban. Ha hibázott, radírozza ki teljesen a kört. Ha nincs felsorolva az az illat, amelyet érzett, akkor azt a kört satírozza be, amelyiknél a válasz a legközelebb áll a szaglási élményéhez. Ha nem érzett semmit, akkor tippeljen, és jelöljön meg egy választ. AHHOZ, HOGY A TESZT ÉRVÉNYES LEGYEN, MINDEN EGYES KÉRDÉSNÉL MEG KELL JELÖLNIE EGY VÁLASZT (AKKOR IS, HA NEM ÉRZETT SEMMIT).
- Miután mind a 10 kérdést megválaszolta a füzetben, töltsé ki sorrendben (azaz a 2-től a 4-ig) a másik három füzetet is.
- Helyezze a teljesen kitöltött füzeteket és a ceruzáját a borítékba, és adja vissza azokat a teszt vezetőjének. Ügyeljen arra, hogy mind a 40 kérdést megválaszolja, és hogy minden egyes füzet hátoldalán ki legyenek töltve az adatmezők. Köszönjük!



Each test is single use only



Keep Dry

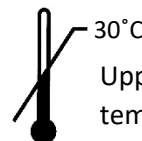

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos váratlan eseménynek a következőnek kell lennie: jelentést tesz a gyártónak és a tagállam illetékes hatóságának.