




## BLAD MET PRODUCTINSTRUCTIES

**PRODUCTCATEGORIE:** Geurtesten met micro-capsules van Sensonics

**PRODUCTNAAM:** De Smell Identification Test™ (UPSIT®)

### BESCHRIJVING:

De Smell Identification Test™ [UPSIT] is onze uitgebreide test met 40 items. Het is de meest betrouwbare (test-hertest  $r=0,94$ ) en nauwkeurige geurtest die er is. Het is de wereldwijde standaard voor geurtesten. Geeft een absolute indicatie van geurverlies (anosmie; milde, matige of ernstige microsomie) en een relatieve indicatie op basis van leeftijds- en geslachtsgerelateerde percentielen. Biedt ook een index om simulering te detecteren. Er zijn normen van bijna 4.000 mannen en vrouwen uit de hele leeftijdscategorie opgenomen. Als dit uw eerste aankoop is, raden wij u de SITTM-toedieningshandleiding aan, met een scoresleutel aan de binnenzijde van de voorpagina.

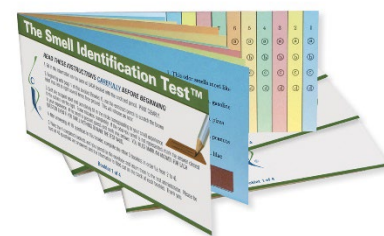

### INSTRUCTIES:


- Vul de informatie achter op ELK boekje in met het bijgevoegde potlood. **SCHRIJF DUIDELIJK EN IN HOOFDLETTERS.**
- Begin met pagina 1 van boekje 1 en gebruik het bijgevoegde potlood om het bruine etiket meerdere keren van links naar rechts te bekrassen (zie afbeelding). Hierbij komt een geur vrij. Schraap niet te veel over het etiket.
- Snuif aan het afgeschraapte etiket en vul in de rechterkolom de cirkel die met uw geurbeleving overeenkomt volledig op. Gum fouten volledig uit. Als de geur die u ruikt er niet bij staat, markeer dan het antwoord dat het dichtst bij uw ervaring ligt. Als er geen geur aanwezig is, raad er dan een en markeer één antwoord. **OM DE TEST GELDIG TE LATEN ZIJN, MOET U EEN ANTWOORD AANKRUISEN BIJ ELKE VRAAG (ZELFS ALS U NIETS RUIKT).**
- Nadat u alle 10 vragen in het boekje hebt beantwoord, vult u de andere drie boekjes in volgorde in (d.w.z. van 2 t/m 4).
- Doe de vier ingevulde boekjes en uw potlood in de envelop en geef ze terug aan de testbeheerder. Zorg ervoor dat alle 40 vragen zijn beantwoord en dat de informatie op de achterkant van elk boekje is ingevuld. Dank u.



Each test is single use only



Keep Dry

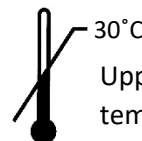

Upper limit storage temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands