




FOLHETO DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO

CATEGORIA DO PRODUTO: testes olfativos microencapsulados da Sensonics

NOME DO PRODUTO: Smell Identification Test™ (UPSIT®)

DESCRIÇÃO:

o Smell Identification Test™ [UPSIT] é o nosso teste abrangente de 40 itens. É o teste olfativo mais fiável (teste- reteste $f=0,94$) e preciso disponível. É o padrão mundial para testes olfativos. Fornece uma indicação absoluta de perda de olfato (anosmia; microcosmia ligeira, moderada ou grave) bem como uma indicação relativa com base em percentis de idade e género. Também fornece um índice para deteção de simulação de doença. São incluídas normas de quase 4000 homens e mulheres abrangendo todo o intervalo de idades. Para os compradores pela primeira vez, recomendamos o Manual de Administração SITT™, que inclui a chave de classificação no interior da capa frontal.

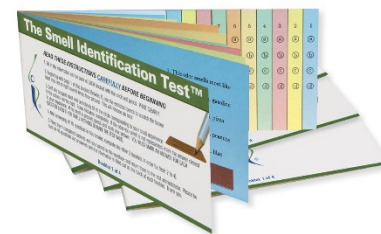

INSTRUÇÕES:


- Preencha as informações no verso de CADA folheto com o lápis que se junta. **ESCREVA DE FORMA LEGÍVEL.**
- Começando na página 1 Folheto 1, utilize o lápis que se junta para raspar a etiqueta castanha da esquerda para a direita várias vezes (ver figura). Será libertado um odor. Não raspe demasiado a etiqueta.
- Cheire a etiqueta raspada e preencha completamente o círculo que corresponde à sua experiência olfativa na coluna à direita. Apague os erros completamente. Se o odor que sentiu não se encontrar representado, assinale a resposta que mais se aproxima da sua experiência. Se não sentir um odor presente, dê um palpite e assinale uma resposta. **DEVE ASSINALAR UMA RESPOSTA PARA CADA PERGUNTA (MESMO QUE NÃO SINTA QUALQUER ODOR) PARA QUE O TESTE SEJA VÁLIDO.**
- Depois de responder às 10 perguntas neste folheto, preencha os outros três folhetos por ordem (ou seja, de 2 a 4).
- Coloque os quatro folhetos concluídos e o lápis no envelope e devolva-os ao administrador do teste. Certifique-se de que respondeu às 40 perguntas e que as informações se encontram preenchidas no verso de cada folheto. Obrigado.




Each test is single use only



Keep Dry

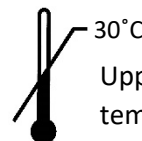

Upper limit storage temperature

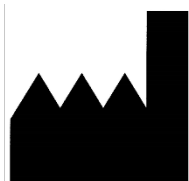

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands