




FIȘA CU INSTRUCȚIUNI A PRODUSULUI

CATEGORIA DE PRODUS: Teste de miros microîncapsulate Sensonics

NUMELE PRODUSULUI: Smell Identification Test™ (UPSIT®)

DESCRIEREA:

Smell Identification Test™ [UPSIT] este testul nostru cuprinzător cu 40 de itemi. Este cel mai fiabil (test-retest $r=0,94$) și cel mai precis test olfactiv disponibil. Acesta reprezintă standardul mondial pentru testarea olfactivă. Oferă o indicație absolută a pierderii mirosului (anosmie; microsmie ușoară, moderată sau severă), precum și o indicație relativă bazată pe percentile legate de vârstă și sex. De asemenea, oferă un index pentru a detecta falsificarea simptomelor. Sunt incluse norme de la aproape 4.000 de bărbați și femei din întreaga gamă de vârstă. La prima achiziție, recomandăm Manualul de administrare SITTM, care include cheia de punctare pe capacul interior frontal.

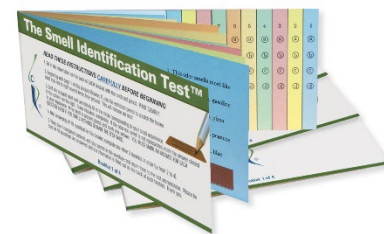

INSTRUCȚIUNI:


- Completați informațiile de pe spatele FIECĂREI broșuri cu creionul inclus. **SCRIEȚI CLAR CU LITERE DE TIPAR.**
- Începând de la pagina 1 a Broșurii 1, utilizați creionul inclus pentru a răzui eticheta maro de la stânga la dreapta de mai multe ori (a se vedea imaginea). Aceasta va elibera un miros. Nu răzuiți prea tare eticheta.
- Miroșiți eticheta răzuită și umpleți cercul care corespunde experienței dvs. legate de miros în coloana din dreapta. Ștergeți complet greșelile. Dacă nu este reprezentat mirosul simțit de dvs., marcați răspunsul cel mai apropiat de ceea ce ați simțit. Dacă nu este prezent niciun miros, ghiciți și marcați un răspuns. **TREBUIE SĂ MARCAȚI UN RĂSPUNS LA FIECARE ÎNTREBARE (CHIAR DACĂ NU SIMȚIȚI NICIUN MIROS) PENTRU CA TESTUL SĂ FIE VALABIL.**
- După ce răspundeți la toate cele 10 întrebări din broșură, completați celelalte trei broșuri în ordine (adică de la 2 la 4).
- Puneți cele patru cărțile completate și creionul în plic și returnați-l persoanei care administrează testul. Vă rugăm să vă asigurați că se răspunde la toate cele 40 de întrebări și că sunt completate informațiile de pe spatele fiecărei broșuri. Vă mulțumim.




Each test is single use only



Keep Dry

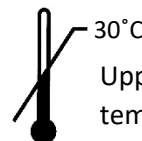

Upper limit storage temperature

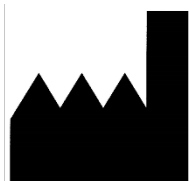

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands