



TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

TUOTELUOKKA: Sensonicsin mikrokapseloidut hajutestit

TUOTTEEN NIMI: Smell Identification Test™ -hajutunnistustesti (UPSIT®)

KUVAUS:

Smell Identification Test™ [UPSIT] on kattava 40-kohtainen testimme. Se on luotettavin (testi/uudelleentesti $r = 0,94$) ja tarkin hajutesti saatavilla. Se on maailmanlaajuinen hajutestien standardi. Se antaa absoluuttisen indikaation hajuaistin heikentymisestä (anosmia; lievä, keskivaikea tai vakava mikrosomia) sekä suhteellisen indikaation ikään ja sukupuoleen liittyvien prosenttipisteiden perusteella. Sisältää myös indeksin, jolla voidaan havaita sairaaksi tekeytyminen. Tähän sisältyy lähes 4 000 miehen ja naisen normit koko ikäjakauman osalta. Ensioistajille suosittelemme SITTM-käyttöopasta, jonka etukannessa on pisteytysavain.



OHJEET:


- Täytä pyydetyt tiedot KUNKIN kirjasen takasivulla oheisella lyijykynällä. KIRJOITA SELVÄSTI.
- Aloita kirjasen 1 ensimmäiseltä sivulta ja käytä oheista lyijykynää raaputtaaksesi ruskeaa liuskaa oikealta vasemmalle useita kertoja (katso kuva). Tämä vapauttaa hajun. Älä raaputa liuskaa liikaa.
- Haista raaputettua liuskaa ja mustaa oikealla olevasta sarakkeesta se ympyrä, joka vastaa hajukokemustasi. Pyyhi virheet pois kokonaan. Jos hajua, jonka haistat, ei ole mainittu, merkitse haju, joka vastaa lähimmin kokemustasi. Jos hajua ei ole, arvaa ja merkitse yksi vastaus. SINUN ON VASTATTAVA KUHUNKIN KYSYMYKSEEN (VAIKKA ET HAISTAISIKAAN MITÄÄN), JOTTA TESTI OLISI PÄTEVÄ.
- Kun olet vastannut kuhunkin kirjasen kymmenestä kysymyksestä, täytä muut kolme kirjasta järjestyksessä (eli kirjasesta 2 kirjaseen 4).
- Aseta neljä valmista kirjasta ja lyijykynä kirjekuoreen ja palauta ne testin antajalle. Varmista, että kaikkiin 40 kysymykseen on vastattu ja että pyydetyt tiedot on täytetty kunkin kirjasen takaosaan. Kiitos.



Each test is single use only



Keep Dry

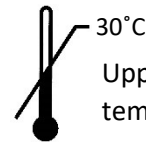

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com

EC

REP

MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands