




ÜRÜN TALİMAT SAYFASI

ÜRÜN KATEGORİSİ: Sensonics Mikrokapsülenmiş Koku Testleri

ÜRÜN ADI: Smell Identification Test™ (UPSIT®)

TANIM:

Smell Identification Test™ [UPSIT], 40 maddelik kapsamlı testimizdir. Mevcut en güvenilir (test - test tekrarı $r=0,94$) ve kesin sonuç veren koku testidir. Koku testi için dünya çapında standart olarak kabul edilir. Koku kaybının mutlak bir göstergesinin (anozmi; hafif, orta veya şiddetli mikrozomi) yanı sıra yaş ve cinsiyetle ilgili yüzdelere dayalı olarak göreceli bir gösterge sağlar. Ayrıca, hasta rolü yapılmasını saptamak için bir indeks sağlar. Tüm yaş aralığından yaklaşık 4.000 erkek ve kadının normları dâhil edilmiştir. İlk kez satın alanlar için iç ön kapaktaki puanlama anahtarını içeren SITTU Uygulama Kılavuzunu öneriyoruz.

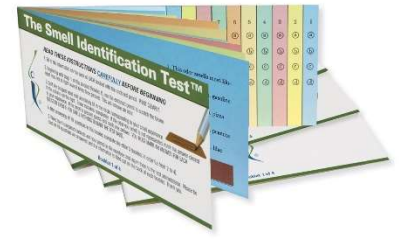

TALİMATLAR:


- HER kitapçık arkasındaki bilgileri verilen kalemle doldurun. AÇIK ŞEKİLDE YAZDIRIN.
- 1. Kitapçığın 1. sayfasından başlayarak birlikte verilen kalemle kahverengi etiketi soldan sağa birkaç kez kazıyın (resme bakın). Bu bir koku yayacaktır. Etiketini aşırı kazımayın.
- Kazınan etiketi koklayın ve deneyiminize karşılık gelen kokunun sağdaki sütunda yer alan dairesini doldurun. Hataları tümüyle silin. Kokladığınız koku yoksa, en yakın yanıtı işaretleyin. Herhangi bir koku almazsanız, tahmin edin ve bir yanıtı işaretleyin. TESTİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN (HİÇ BİR KOKU ALMASANIZ BİLE) HER SORU İÇİN BİR YANITI İŞARETLEMELİSİNİZ.
- Kitapçıkta 10 soruya yanıt verdikten sonra, diğer kitapçıkları da sırayla (yani 2'den 4'e kadar) tamamlayın.
- Tamamlanmış dört kitapçığı ve kalemli zarfa koyun ve test yöneticisine geri verin. Lütfen 40 soruya da yanıt verdiğinizden ve her kitapçık arkasındaki bilgilerin doldurulduğundan emin olun. Teşekkür ederiz.



Each test is single use only



Keep Dry

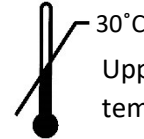

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702
www.sensonics.com

MANUFACTURER



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands