




## GAMINIO INSTRUKCIJŲ LAPAS

**GAMINIO KATEGORIJA:** „Sensonics“ mikrokapsuliuoti kvapo testai

**GAMINIO PAVADINIMAS:** Smell Identification Test™ („UPSIT®“)

### APRAŠYMAS:

Smell Identification Test™ („UPSIT“) yra mūsų išsamus 40 elementų testas. Jis yra patikimiausias (kartotiniu testavimu nustatomas testo patikimumas,  $r = 0,94$ ) ir tiksliausias uoslės testas. Jis atitinka uoslės testavimo pasaulinius standartus. Nustatomas visiškas uoslės netekimas (anosmija - lengva, vidutinė ar sunki mikrosmija) taip pat santykinis nustatymas, pagrįstas su amžiumi ir lytimi susijusiais procentiliais. Taip pat pateikiamas indeksas, skirtas nustatyti apsimetinėjimą sergančiu. Įtrauktos beveik 4 000 vyrų ir moterų normos, apimančios visą amžiaus intervalą. Pirmą kartą įsigyjant prekę rekomenduojame „SITTM“ administracijos vadovą, kurio viršelio viduje yra vertinimo lapelis.

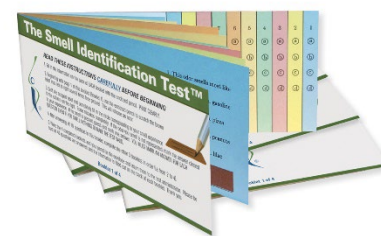

### INSTRUKCIJOS:


- Užpildykite informaciją KIEKVIENO bukletu galinėje pusėje pridedamu pieštuku. RAŠYKITE AIŠKIAI SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS.
- Pradėkite nuo 1 bukletu 1 puslapio ir naudodami pridedamą pieštuką kelis kartus pabraižykite rudą etiketę iš kairės į dešinę (žr. paveikslėlį). Taip išsiskirs kvapas. Negrandykite etiketės pernelyg stipriai.
- Pauostykite pagrandytą etiketę ir dešinėje esančiame stulpelyje užspalvinkite apskritimą, atitinkantį Jūsų užuostą kvapą. Klaidas visiškai nutrinkite. Jei Jūsų užuostas kvapas nenurodomas, pažymėkite artimiausią Jūsų potyriui atsakymą. Jei jokio kvapo nėra, spėkite ir pažymėkite vieną atsakymą. KAD TESTAS BŪTŲ GALIOJANTIS, PRIVALOTE PRIE KIEKVIENO KLAUSIMO PAŽYMĖTI PO VIENĄ ATSAKYMĄ (NET JEI NIEKO NEUŽUODŽIATE).
- Atsakę į visus 10 klausimų buklete, iš eilės užpildykite kitus tris bukletus (t. y. nuo 2 iki 4).
- Sudėkite keturis užpildytus bukletus ir pieštuką į voką ir grąžinkite testo administratoriui. Įsitinkite, kad atsakėte į visus 40 klausimų ir užpildėte visą informaciją kiekvieno bukletu galinėje pusėje. Ačiū.



Each test is single use only



Keep Dry

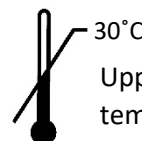

Upper limit storage temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands