




KARTA INSTRUKCJI PRODUKTU

KATEGORIA PRODUKTU: Testy zapachowe Sensonics metodą mikrokapsułkowania

NAZWA PRODUKTU: Smell Identification Test™ (UPSIT®)

OPIS:

Test identyfikacji zapachów Smell Identification Test™ [UPSIT] to nasz kompleksowy test składający się z 40 pozycji. Jest to najbardziej wiarygodny (test – ponowny test $r=0,94$) i dokładny test węchowy. Jest to ogólnosiwiatowy standard w zakresie testów węchowych. Zapewnia bezwzględne wskazanie utraty węchu (anosmia; łagodna, umiarkowana lub ciężka mikrosomia), a także względne wskazanie na podstawie percentyli związanych z wiekiem i płcią. Zapewnia również indeks do wykrywania zjawiska symulowania. Uwzględniono normy pochodzące od blisko 4000 mężczyzn i kobiet z całego przedziału wiekowego. Dla osób kupujących po raz pierwszy polecamy Podręcznik administracji SITTM, który na wewnętrznej stronie przedniej okładki zawiera kartę kryteriów.

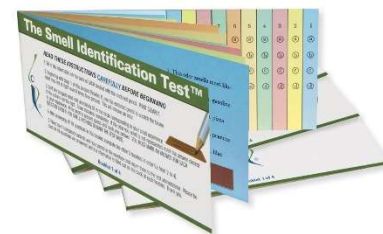

INSTRUKCJE:


- Należy uzupełnić informacje na odwrocie KAŻDEJ broszury, używając dołączonego ołówka. WYPEŁNIĆ CZYTELNIE I DRUKOWANYMI LITERAMI.
- Zaczynając od strony 1 tej broszury (Broszura 1), dołączonym ołówkiem należy kilkakrotnie potrząsnąć brązową naklejkę od lewej do prawej strony (patrz ilustracja). Spowoduje to uwolnienie zapachu. Nie należy nadmiernie pocierać naklejki.
- Potartą naklejkę należy powąchać, a następnie w kolumnie po prawej stronie zamalować kółko odpowiadające odczuwanemu zapachowi. Błędne zaznaczenia należy zetrzeć w całości. Jeśli żadna z możliwości nie odpowiada rozpoznanemu zapachowi, proszę zaznaczyć najbliższą mu odpowiedź. Jeśli nie jest wyczuwany żaden zapach, proszę zgadywać i zaznaczyć jedną z odpowiedzi. ABY PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ TEST, NALEŻY UDZIELIĆ ODPOWIEDZI NA KAŻDE PYTANIE (NAWET JEŚLI NIE JEST WYCZUWANY ŻADEN ZAPACH).
- Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 10 pytań z broszury należy uzupełnić pozostałe trzy w odpowiedniej kolejności (tj. od 2 do 4).
- Cztery uzupełnione broszury i ołówek należy umieścić w kopercie, a następnie zwrócić je osobie prowadzącej badanie. Proszę sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na wszystkie 40 pytań i uzupełniono informacje na odwrocie każdej broszury. Dziękujemy.



Each test is single use only



Keep Dry

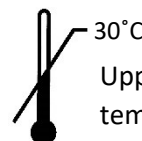

Upper limit storage temperature



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER www.sensonics.com

EC

REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands