



ANLEITUNG FÜR DAS PRODUKT

PRODUKTKATEGORIE: Sensonics Teststreifen für den Geschmacksinn

PRODUKTNAME: Waterless Empirical Taste Test (WETT®)

GEWICHT: 1,034 kg

ABMESSUNGEN: 7,25 x 11 x 10 Zoll


BESCHREIBUNG:

Der Waterless Empirical Taste Test™ (WETT®) bietet eine einfache und günstige Methode zur quantitativen Beurteilung des Geschmacksinns. Die Bereitstellung von Geschmacksstoffen erfolgt über Kunststoffstreifen mit proprietären Pads aus Monomer-Zellulose, in die entweder Saccharose (süß), Citronensäure (sauer), Natriumchlorid (salzig), Koffein (bitter), Mononatriumglutamat (umami) oder neutrale Geschmacksstoffe eingebettet ist. Spülen mit Flüssigkeit ist nicht erforderlich. Es werden 50 Streifen von jedem Geschmacksstoff in tragbaren Hartplastikbehältern bereitgestellt. Für Erstkäufer empfehlen wir das Waterless Empirical Taste Test™ Handbuch zur Untersuchung und Beurteilung von Sensonics, das weitere Details für das Verfahren der Testdurchführung enthält.



ANLEITUNG:

- Der WETT® sollte idealerweise in einer ruhigen Testumgebung ohne Ablenkungen durchgeführt werden.
- Zum Testen sollte der Durchführer das Kit auf einen Arbeitsbereich legen, der ihm/ihr zugewandt ist. Der Proband sollte auf der anderen Seite des Kits sitzen. Geben Sie dem Proband eine kleine Tasse oder einen anderen Abfallbehälter zum Entsorgen der benutzten Streifen nach deren Verwendung.
- Der Prüfer sollte während des Tests unbeduftete Latexhandschuhe tragen. Die Geschmacksstreifen sollten nicht ohne Handschuhe berührt werden.
- Jeder Geschmacksstreifen ist fortlaufend nummeriert. Präsentieren Sie die Geschmacksstreifen in der Reihenfolge, die auf dem dem Kit beiliegenden WETT®-Testblatt angegeben ist.
- Bitten Sie den Proband, den Geschmacksabschnitt des Streifens auf die Zunge zu legen und ihn auf der Zunge zu bewegen, einschließlich der Ränder und des hinteren Teils der Zunge.
- Fragen Sie den Proband nach dem Probieren jedes einzelnen Streifen, welche der folgenden Geschmacksrichtungen geschmeckt wurden: süß, sauer, salzig, bitter, Brühe (Suppe, salzig) oder gar kein Geschmack. Die bei diesem Test verwendeten Geschmacksstreifen sind sicher.
- Verwenden Sie den WETT®-Bewertungsschlüssel, um das Testergebnis zu bewerten.
- Die Durchführungsdauer des WETT®-Tests variiert je nach Geschmackssinn des Probanden. Bei den meisten gesunden Probanden beträgt die Durchführungsdauer 10 bis 15 Minuten.

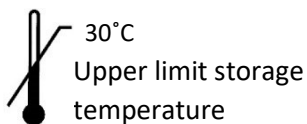

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702
www.sensonics.com

MANUFACTURER



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich in Bezug auf das Produkt ereignet hat, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet.