



## HOJA DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

**CATEGORÍA DEL PRODUCTO:** Pruebas de las tiras de sabor de Sensonics

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Waterless Empirical Taste Test (WETT®)

**PESO:** 36.5 oz

**DIMENSIONES:** 7.25 x 11 x 10 in


**DESCRIPCIÓN:**



La prueba Waterless Empirical Taste Test™ (WETT®) es un método fácil y económico para evaluar cuantitativamente la función del gusto. La administración de las sustancias sápidas se realiza a través de tiras plásticas con almohadillas registradas de monómeros de celulosa que incorporan sacarosa (dulce), ácido cítrico (agrio), cloruro de sodio (salado), cafeína (amargo), glutamato monosódico (umami) o sustancias vacías. No se requiere enjuague líquido. Se proporcionan 50 tiras de cada sustancia sávida en recipientes portátiles de plástico duro. Para los compradores nuevos, recomendamos el *Manual de evaluación y prueba de la Waterless Empirical Taste Test™ de Sensonics*, que incluye más detalles sobre el procedimiento de administración de la prueba.

**INSTRUCCIONES:**

- Lo ideal es que la WETT® se administre en un entorno de prueba tranquilo y sin distracciones.
- Para la prueba, el administrador debe colocar el kit ante sí en un espacio de trabajo y hacer que el sujeto se siente del otro lado del kit. Proporcione al sujeto una taza pequeña u otros contenedores de basura para desechar las tiras de sabor después de usarlas.
- El examinador debe usar guantes de látex sin aroma durante la prueba. Las tiras de sabor no deben tocarse sin estos.
- Cada tira de sabor está numerada secuencialmente. Presente las tiras de sabor en el orden indicado en la hoja de prueba WETT®, que viene con el kit.
- Pídale al sujeto que coloque el área de gusto de la tira en la lengua y que lo mueva alrededor de la lengua, incluidos los bordes y la parte posterior de la lengua.
- Después de probar cada tira, pregúntele al sujeto cuál de las siguientes opciones sintió sabor: dulce, agrio, salado, amargo, a caldo (sopa o sabroso) o ausencia de sabor. Las tiras de sabor utilizadas en esta prueba son seguras.
- Use la clave de puntuación de la WETT® para evaluar el resultado de la prueba.
- El tiempo de administración de la prueba WETT® varía, dependiendo de la capacidad gustativa del sujeto. Para la mayoría de los sujetos comunes, el tiempo de administración de la prueba se extiende de 10 a 15 minutos.

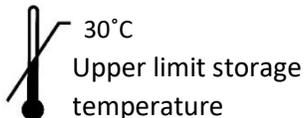

**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702

MANUFACTURER [www.sensonics.com](http://www.sensonics.com)



**MedEnvoy Global B.V.**  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands