



BLAD MET PRODUCTINSTRUCTIES

PRODUCTCATEGORIE: Smaakstrip-tests van Sensonics

PRODUCTNAAM: Waterless Empirical Taste Test (WETT®)

GEWICHT: 1035 gr. (36,5 oz)

AFMETINGEN: 18,4 x 27,9 x 25 cm (7,25 x 11 x 10 inch)


BESCHRIJVING:



De Waterless Empirical Taste Test™ (WETT®, watervrije empirische smaaktest) is een eenvoudige en goedkope methode voor kwantitatieve beoordeling van de smaakfunctie. De toediening van de smaakstoffen gebeurt via plastic strips met speciale doekjes van monomeercelulose die zijn gedoopt in sucrose (zoet), citroenzuur (zuur), natriumchloride (zout), cafeïne (bitter), mononatriumglutamaat (umami) of blanco smaakstoffen. Er is geen vloeibare spoeling nodig. Van elk smaakstof worden 50 strips geleverd in harde plastic, draagbare containers. Bij de eerste aankoop van het product raden we de *Test- en beoordelingshandleiding voor de Waterless Empirical Taste Test™ van Sensonics* aan, die meer informatie bevat over de testprocedure.

INSTRUCTIES:

- De WETT® dient te worden uitgevoerd in een rustige testomgeving zonder afleiding.
- De uitvoerder van de test moet de testkit op zichzelf gericht op een werkoppervlak plaatsen en de proefpersoon moet aan de andere kant van de kit plaatsnemen. Geef de proefpersoon een kleine beker of andere afvalcontainer voor het weggooien van smaakstrips na gebruik.
- De onderzoeker moet tijdens het testen ongeparfumeerde latex handschoenen dragen. Zonder deze mogen de smaakstrips niet worden aangeraakt.
- De smaakstrips zijn opeenvolgend genummerd. Presenteer de smaakstrips in de volgorde die wordt aangegeven op het WETT®-testblad, dat bij de kit is geleverd.
- Vraag de proefpersoon om de smaaksector van de strip op de tong te plaatsen en ermee over de tong te bewegen, ook over de randen en de achterkant van de tong.
- Vraag de proefpersoon na het proeven van elke strip welke van de volgende smaken de strip had: zoet, zuur, zout, bitter, umami (soepachtig, hartig) of helemaal geen smaak. De bij deze test gebruikte smaakstrips zijn veilig.
- Gebruik de WETT®-scoresleutel om het testresultaat te beoordelen.
- De uitvoeringstijd van de WETT®-test varieert, afhankelijk van het smaakvermogen van de proefpersoon. Bij de meeste normale proefpersonen duurt de test 10 tot 15 minuten.

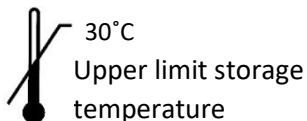

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702
www.sensonics.com

MANUFACTURER



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands