



## NÁVOD K POUŽITÍ PRODUKTU

**KATEGORIE PRODUKTU:** Mikrokapsulované čichové testy od Sensonics

**NÁZEV PRODUKTU:** Rychlý čichový identifikační test (Brief Smell Identification Test™ (B-SIT®))

### POPIS:

Tato 12-kusová verze čichového identifikačního testu (Smell Identification Test®), rovněž známého jako interkulturní čichový identifikační test, je užitečná při vyčíslování straty čichu v situacích, kde je k dispozici méně než pět minut. Tento test se hodí na průzkumy populace a pro obecné studie na pracovišti. Vůně jsou ve většině kultur dobře známé. Percentilní normy, založené na tisících subjektů, jsou dostupné v návodě na správu rychlého čichového identifikačního testu (The Brief Smell Identification Test™). Je-li toto vaše první objednávka, doporučujeme vám zakoupit si tento návod.



### POKYNY:


- Vyplňte údaje na zadní straně KAŽDÉHO sešitu pomocí přibalené tužky. VYPIŠTE ČITELNĚ.
- Začněte položkou 1 v sešitě. Pomocí přibalené tužky několikrát poškrabte hnědý štítek zleva doprava (viz obrázek). Uvolní se zápach. Neškrabte štítek nadměrně.
- Očištejte poškrábaný štítek a plně vyplňte kroužek odpovídající vašemu čichovému zážitku v sloupku vpravo. Úplně vymažte chyby. Pokud není zápach, jenž cítíte, zastoupen, označte odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu zážitku. Necítíte-li nic, tipněte si a označte jednu odpověď. MUSÍTE ODPOVĚDĚT NA KAŽDÝ DOTAZ (I KDYŽ NECÍTÍTE NIC), ABY BYL TEST PLATNÝ.
- Umístěte vyplněný sešit a tužku do obálky a vraťte je osobě dohlížející na test. Prosím, ujistěte se, že jste zodpověděli všechny dotazy a vyplnili všechny údaje na zadní straně sešitu. Děkujeme.



Each test is single use only



Keep Dry

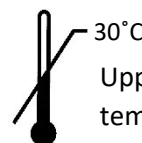

Upper limit storage temperature



**Sensonics International**  
411 South Black Horse Pike  
Haddon Heights, NJ 08035  
United States  
Contact no. (856)-547-7702  
www.sensonics.com

MANUFACTURER



**MedEnvoy Global B.V.**

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, by měla být nahlášené výrobci a příslušnému orgánu členského státu.