



ANLEITUNG FÜR DAS PRODUKT

PRODUKTKATEGORIE: Sensonics' Microencapsulated Smell Tests (++)G051SITTK)

PRODUKTNAME: The Pocket Smell Test™ (PST)

BESCHREIBUNG:

Der Pocket Smell Test™ ermöglicht es, die Funktion des Hirnnervs I schnell und gezielt zu testen. Um ein durch diesen Test festgestelltes Geruchsproblem vollständig zu bestimmen, führen Sie den 40 Punkte umfassenden Smell Identification Test™ durch. Der letztgenannte Test bietet Normen für beide Geschlechter jeglichen Alters, eindeutige Diagnosekategorien und Mittel zur Erkennung von Täuschungen.



ANLEITUNG:

- Geben Sie den ersten Geruch mit der Spitze eines Bleistifts oder Stifts frei.
- Lesen Sie dem Patienten die Antwortalternativen vor und kreisen Sie die Antwort des Patienten ein.
- Falls gewünscht, testen Sie jedes Nasenloch separat.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit den übrigen Gerüchen.
- Um das Problem vollständig zu charakterisieren, verabreichen Sie den 40 Punkte umfassenden Smell Identification Test™.



Each test is single use only




Keep Dry



30°C

Upper limit storage temperature

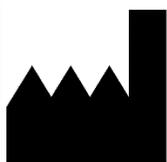

Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702
www.sensonics.com

MANUFACTURER



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands