



HOJA DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

CATEGORÍA DEL PRODUCTO: Pruebas olfativas microencapsuladas de Sensonics (++G051SITTK)

NOMBRE DEL PRODUCTO: The Pocket Smell Test™ (PST)

DESCRIPCIÓN:

The Pocket Smell Test™ proporciona un medio rápido de elección forzada para probar la función del nervio olfativo. Para caracterizar por completo un problema olfativo descubierto por esta prueba, realice la prueba Smell Identification Test™ de 40 elementos. Esta prueba proporciona normas para personas de ambos sexos y de todos los intervalos de edad, categorías diagnósticas claras y medios para detectar la simulación



INSTRUCCIONES:


- Libere el primer olor con la punta del lápiz o bolígrafo.
- Lea las respuestas alternativas al paciente y rodee con un círculo la respuesta del paciente.
- Si lo desea, pruebe con cada fosa nasal por separado.
- Repita con los olores restantes.
- Una o más respuestas incorrectas sugieren disfunción olfatoria. Para determinar por completo el problema, realice la prueba Smell Identification Test™ de 40 elementos



Cada prueba Pocket es de un solo uso



Mantener seco

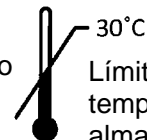

Límite superior de temperatura de almacenamiento



Sensonics International
411 South Black Horse Pike
Haddon Heights, NJ 08035
United States
Contact no. (856)-547-7702
www.sensonics.com

MANUFACTURER

EC

REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands